


シリカゲル投入機

SLI-40N

錠剤・カプセルをボトルに充填する前後工程でシリカゲルを投入します。

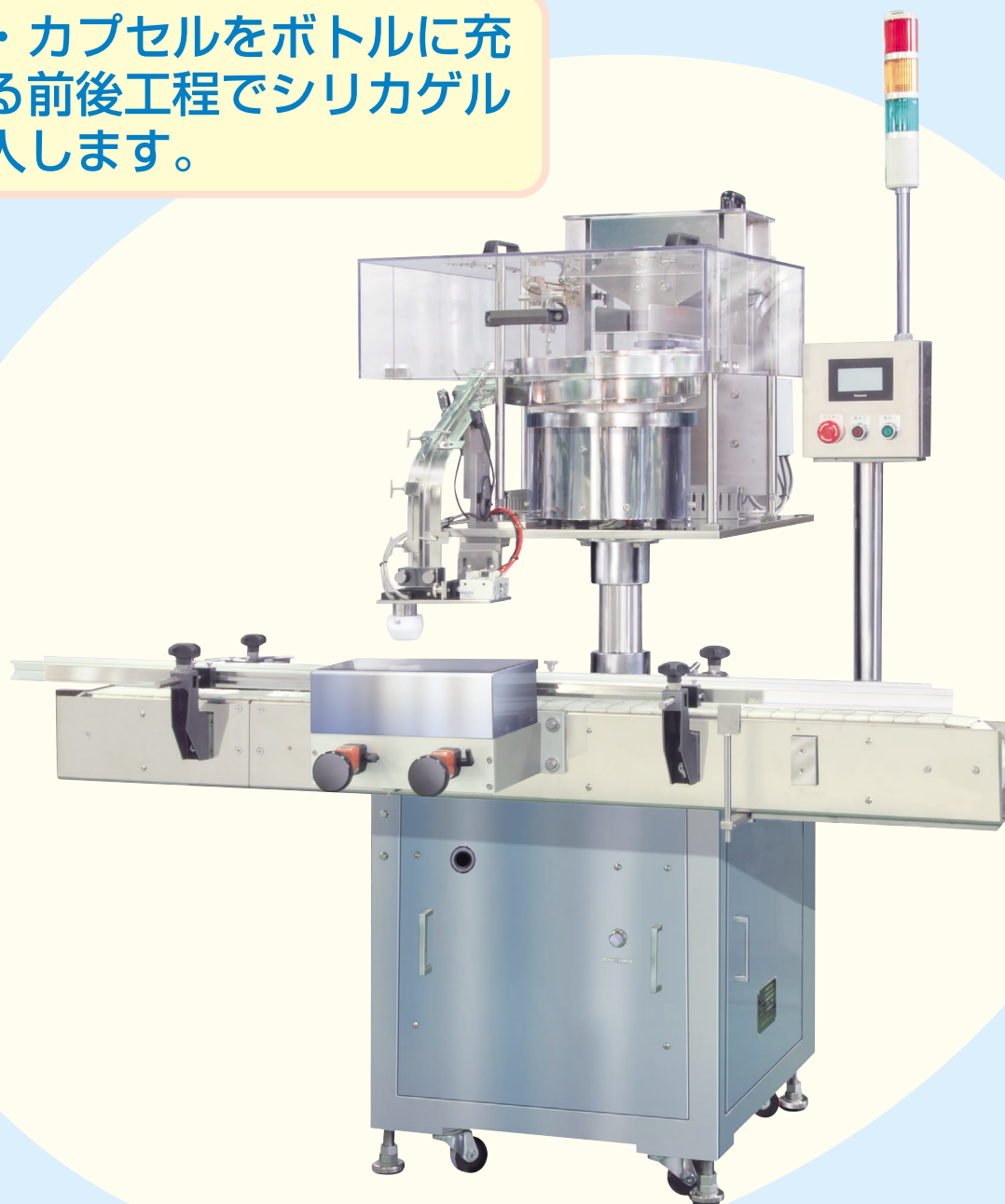

特 徴

1. 幅広いボトルサイズ、シリカゲルサイズに対応できる汎用性の高い装置です。
2. シリカゲル投入確認機能付きで充填ミスの起きない装置です。

概 要

ホッパーにタブレット型シリカゲルを供給すると、直進フィーダーおよびパーツフィーダーの振動によって充填シュートの先端にシリカゲルを1列に整列させます。充填シュート先端のシリカゲルはスライダーユニットにより1個ずつ切り出され、コンベアー上の容器に充填されます。ボトルのサイズ違いは調整のみで対応できるのはもとより、シリカゲルのサイズ・形状違いはスライダーユニットの交換で対応ができる汎用性の高い装置です。

仕 様

型 式 : SLI-40N
名 称 : シリカゲル投入機
充 填 能 力 : MAX40本/分(1個充填/ボトル)
適合充填物 : タブレット型シリカゲル(紙包タイプ)
 コイン形 $\phi 10\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$ 厚み5~15mm
 四角形 $\square 10\text{mm} \sim \square 25\text{mm}$ 厚み5~15mm
ホッパー容量 : 約5リットル(残量検知センサー搭載)
搬 送 方 式 : パーツフィーダー(ボウル内面ステンレス光沢仕上げ)
充 填 方 式 : シリカゲルスライダーユニットによる切り出し方式
ボトル適合寸法 : 胴径30~90mm、高さ60~160mm、口内径20mm以上
 ※ボトル胴径はボトルストッパーユニットでアジャスト可能
 ※ボトル高さは本体上下調整でアジャスト可能
安 全 装 置 : シリカゲル投入検知、シリカゲル詰まり検知、エアー圧低下時停止
機 械 寸 法 : 幅 600mm× 奥行き 1,200mm× 高さ 1,600~1,700mm
オ プ シ ョ ン : タッチパネル式操作盤、パーツフィーダー上面カバー
電 源 : AC200V, 50/60Hz
圧 空 源 : 常用 0.5MPa 使用量 50NL

営業品目

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| ◆各種錠剤計数充填機 | ◆錠剤・カプセル目視検査機 | ◆ポリシート詰機 |
| ◆錠剤投入機 | ◆キャップ巻締機 | ◆ボトルエアークリーナー |
| ◆インナーシール機 | ◆シリカゲル投入機 | |



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川 越 機 械 株 式 会 社

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159
西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店